

Benexè®

X IL TUO INTESTINO

SUPPOSTE DI GLICEROLO
ADULTI

18 SUPPOSTE - 2500 mg

Si prega di leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto. Il foglietto illustrativo risponde ad alcune delle domande più frequenti su Benexè® Supposte di Glicerolo. Utilizzare Benexè® Supposte di Glicerolo seguendo le istruzioni e i consigli riportati nel foglietto illustrativo e in caso di dubbi sull'uso di Benexè® Supposte di Glicerolo chiedere al medico o al farmacista. Non gettare questo foglietto e mantenerlo con il prodotto: potrebbe essere necessario rileggerlo all'occorrenza.

Presentazione del prodotto

Benexè® Supposte di Glicerolo è un dispositivo medico monouso per utilizzo rettale, indicato per facilitare l'attività evacuante dell'intestino.

Composizione

Una supposta contiene: glicerolo 2315 mg; sodio stearato e sodio bicarbonato q.b. a 2500 mg.

Quando usare Benexè® Supposte di Glicerolo

Benexè® Supposte di Glicerolo può essere utilizzato per il trattamento di breve durata della stitichezza occasionale. È una supposta di durata e azione temporanea che lavora per lubrificare la massa fecale e favorirne l'espulsione. Non utilizzare Benexè® Supposte di Glicerolo per altro impiego. Non ingerire, solo per uso rettale.

Quando non usare Benexè® Supposte di Glicerolo

Non usare Benexè® Supposte di Glicerolo in caso di crampi, coliche, dolore addominale acuto o di origine sconosciuta e se sofferenti di malattie infiammatorie intestinali, come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn. Evitare l'uso anche in presenza di nausea, vomito, sangue nelle feci, ragadi anali, ostruzioni intestinali e Ileus (perdita del tono muscolare dell'intestino). Bassi livelli di potassio nel sangue o grave stato di disidratazione sconsigliano l'uso di Benexè® Supposte di Glicerolo. Non somministrare in caso di allergia o ipersensibilità ad uno qualsiasi degli ingredienti. Benexè® Supposte di Glicerolo non va utilizzato dopo la data di scadenza stampata sulla confezione e sul contenitore di alluminio o se la confezione non appare integra.

Informare il medico in caso di:

- assenza di qualsiasi movimento dell'intestino, anche solo per pochi giorni, o se si nota un cambiamento improvviso delle sue abitudini o dei suoi movimenti che dura da più di due settimane;
- ingestione accidentale;
- insorgenza di effetti indesiderati;
- assunzione concomitante di altri medicinali o dispositivi medici.

Utilizzo nei bambini

Benexè® Supposte di Glicerolo non è indicato per bambini e ragazzi sotto i 12 anni.

Utilizzo in gravidanza o durante l'allattamento al seno


Non sono note interazioni con altri principi attivi farmaceutici, pertanto, in mancanza di dati clinici e in caso di uso concomitante con altri medicinali o dispositivi medici, si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare Benexè® Supposte di Glicerolo.

Attività e proprietà

Le preparazioni per uso rettale a base di glicerolo dimostrano attività evacuante senza che il prodotto stesso venga assorbito dalla mucosa intestinale. Il glicerolo, infatti, è in grado, quando presente nel lume intestinale, di esplicare la sua attività non conseguentemente ad un suo assorbimento sistemico, ma semplicemente sulla base di un meccanismo fisico. Ammorbidisce le feci e agisce lubrificando la parete del retto, incoraggiando i movimenti intestinali e le contrazioni muscolari che spingono la massa fecale fino a promuoverne l'espulsione.



Modalità d'impiego e istruzioni per l'uso:

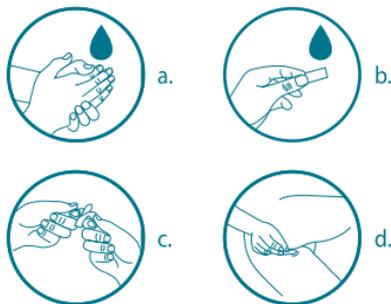

Lavare accuratamente le mani prima e dopo l'uso di supposte (a). Se la supposta è troppo molle da utilizzare si raccomanda di metterla in frigorifero per qualche minuto o sotto l'acqua fredda (b), dopo di che è possibile rimuovere l'involucro (c) e poi bagnare con acqua fredda o con un lubrificante a base acquosa per facilitarne l'inserimento. Sdraiarsi su un fianco e inserire l'estremità appuntita della supposta nel retto. Spingere completamente con il dito, in caso contrario la supposta può essere espulsa (d). Rimanere sdraiati, possibilmente a pancia in giù, per qualche minuto prima di mettersi seduti o in piedi.

L'effetto si manifesta entro mezz'ora.

PER SOLO USO RETTALE.

Quando e per quanto tempo usare

Benexè® Supposte di Glicerolo

È consigliabile utilizzare Benexè® Supposte di Glicerolo una volta al giorno. Consultare il medico in caso di assenza di risultati o del persistere della costipazione. L'uso prolungato di evacuanti (superiore a 7 giorni) non è auspicabile e può portare a dipendenza. Dosi eccessive possono causare dolori addominali e diarrea; le conseguenti perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate.

Effetti indesiderati

Occasionalmente si può avvertire una leggera sensazione di bruciore rettale.

Consigli per una corretta funzionalità intestinale

Bere molta acqua, aumentare le fibre nella propria dieta e fare regolarmente attività fisica contribuiscono alla corretta funzionalità dell'intestino.

Modalità di conservazione e smaltimento

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da raggi solari e fonti di calore e a temperature non superiori a 30°C.

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Tenere Benexè® Supposte di Glicerolo fuori dalla portata dei bambini.

Periodo di validità

5 anni per il prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Presentazione e contenuto

Benexè® Supposte di Glicerolo si presenta nel seguente confezionamento e dosaggio:
18 supposte da 2500 mg ADULTI.

Data di compilazione o ultima revisione di questo foglietto illustrativo:

Marzo 2021.

 Lab. Chim. Farm. A. Sella s.r.l.
Via Vicenza, 67 - Schio (VI) - Italia



DISPOSITIVO
MEDICO

LEGENDA SIMBOLI



Attenzione consultare le istruzioni per l'uso



Non riutilizzare



Conservare a temperature non superiori ai 30°C



Fabbricante



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Numero del lotto



Data di scadenza



Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso



Codice prodotto



Tenere lontano dalle fonti di calore

Benexè®

X IL TUO INTESTINO
SUPPOSTE DI GLICEROLO
GLYCEROL SUPPOSITORIES
ADULTS

18 SUPPOSITORIES-2500 mg

Please read this leaflet carefully before using this product: it answers to some frequently asked questions on Benexè® Supposte di Glicerolo. Use the product according to the instructions provided in the leaflet and in case of doubts ask for clarification to your doctor or pharmacist. Do not throw away this leaflet and keep it together with the product: it may be necessary to read it again.

Product presentation

Benexè® Supposte di Glicerolo is a disposable medical device for rectal use, recommended to facilitate the evacuation activity of the bowel.

Composition

One suppository of 2500 mg contains: glycerol 2315 mg, sodium stearate and sodium bicarbonate.

When the use of Benexè® Supposte di Glicerolo is recommended

Benexè® Supposte di Glicerolo is recommended for treatment of short duration of occasional constipation. It is a suppository with a temporary action, which is able to lubricate fecal mass to promote its ejection. Do not use Benexè® Supposte di Glicerolo for any other purpose. Do not ingest. For rectal use only.

When the use of Benexè® Supposte di Glicerolo is not advisable

Do not use Benexè® Supposte di Glicerolo in presence of cramps, severe abdominal pain of unknown origin and if the patient suffers from intestine inflammatory diseases, as ulcerative colitis or Crohn's disease. Avoid to use the product also in presence of nausea, vomit, blood into the faeces, anal rhagades, intestinal obstructions, Ileus (loss of intestinal muscular tone), low levels of potassium into the blood and severe state of dehydration. Do not use Benexè® Supposte di Glicerolo in case of allergy or hypersensitivity to glycerol or one of the other components. Do not use after the expiry date printed on the box and the aluminium or if the package is damaged.

Inform your doctor if:

- you notice the absence of any intestinal movement, even for few days, or a sudden change of the usual bowel habits, for more than two weeks;
- the product has been ingested by accident;
- undesirable effects occur;
- you are taking other medicines or medical devices.

Use in children

Benexè® Supposte di Glicerolo is not indicated for children under 12 years.

Use during pregnancy or breast-feeding


There are not known interactions with other active pharmaceutical ingredients, therefore, in the absence of clinical data and in case of concomitant use with other medicines or medical devices, it is recommended to consult your doctor before using Benexè® Supposte di Glicerolo.

Activity and properties

Glycerol-based preparations intended for rectal use show an evacuant activity without the need of product absorption by the intestinal mucosa. Glycerol, indeed, when inserted into the rectum is capable to promote the evacuation by a physical mechanism which does not involve a systemic absorption. Glycerol softens the fecal mass and lubricate rectum wall, causing intestinal movement and muscular contractions that promote the fecal mass ejection.



Instructions for use:

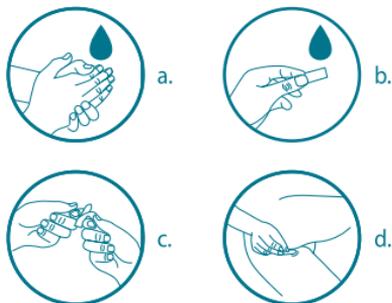

Accurately wash the hands before and after the use of suppositories (a). If the suppository is too soft put it for some minute in a refrigerator or under cold water (b). Remove the external aluminium (c) and wet the suppository with cold water or aqueous lubricant to facilitate the insertion. Lie down on the side and insert the sharp side of the suppository into the rectum. Gently push the suppository completely with a finger: otherwise, it could be expelled (d). Remain lying down, possibly on your belly, for some minutes before to get up. Benexè® Supposte di Glicerolo should have effect within thirty minutes.

FOR RECTAL USE ONLY.

When and for how long use

Benexè® Supposte di Glicerolo

It is advisable to use Benexè® Supposte di Glicerolo once a day. Consult your doctor in case of lack of results or if constipation persists. A prolonged use of laxatives (more than 7 consecutive days) is not recommended and could lead to addiction. Excessive doses of the product can cause abdominal pain and diarrhea. Loss of liquids and electrolytes should be reintegrated.

Side effects

A mild rectal burning sensation could be perceived.

Recommendation for the maintenance of a correct intestinal functionality

Drink much water, increase the fibres amount into the diet and regularly perform physical activity contribute to the functionality of the intestine.

Storage and disposal instructions

Keep the product in a cool and dry place, away from direct sunlight and source of heat.

Do not store over 30°C.

Do not disperse into the environment after use.

Keep the product out of reach of children.

Shelf-life

The product has a 5 years shelf-life if correctly stored in its original container.

Product description

Benexè® Supposte di Glicerolo is available in the following packaging and dosage:

18 suppositories of 2500 ml - ADULTS

Date of issues or latest revision of this leaflet:

March 2021.

 Lab. Chim. Farm. A. Sella s.r.l.
Via Vicenza, 67 - Schio (VI) - Italy


MEDICAL
DEVICE

KEY TO SYMBOLS



Important:
read the
instructions
for use



Do not use
more than once



Storage
temperature
below 30°C



Manufacturer



Read the
leaflet carefully
before use



Lot number



Expiry date



Do not
release into
the environment



Catalogue
number



Keep away
from heat