


Benexè® Microclismi Natural Adulti è un Dispositivo Medico CE a base di Altelax, un complesso polisaccaridico di Altea e Malva con azione evacuable, emolliente e protettiva della mucosa rettale. Ammorbidisce le feci, facilita l'evacuazione e contrasta fastidio, irritazione e infiammazione presenti in caso di stipsi. Il prodotto contiene inoltre Miele ed estratti vegetali quali Limone e Lavanda. Utile anche nei casi in cui è necessaria una pulizia della parte terminale del retto dell'ano.

Composizione: glicerolo, acqua demineralizzata, Miele, Altelax (complesso polisaccaridico di Altea e Malva), estratto idroglicerico di Limone, estratto idroglicerico di Lavanda, conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato.

Modo d'uso: per gli adulti sopra i 12 anni utilizzare 1 microclisma da 9 g al bisogno. In caso di stipsi ostinata utilizzare 2 dosi contemporaneamente. Ogni contenitore monodose è sigillato singolarmente sino al momento dell'uso per garantirne l'igiene. Aprire il microclisma rimuovendo il copricannula (A).

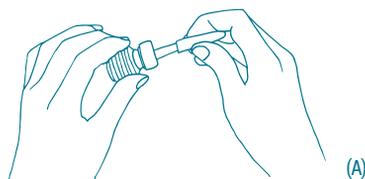

Lubrificare la cannula con qualche goccia di prodotto, introdurre la cannula nel retto e premere a fondo il soffiETTO (B).



Al termine dell'applicazione mantenere premuto il soffiETTO fino ad estrazione completa della cannula per evitare che il prodotto venga riaspirato. Dopo l'utilizzo del prodotto evitare il contatto con gli occhi e lavarsi accuratamente le mani.

Avvertenze: uso rettale, non ingerire. In caso di stipsi persistente è importante consultare il medico per escludere altre patologie. I microclismi non devono essere usati nei casi di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta. Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. In caso di gravidanza o allattamento o in caso si stia pianificando una gravidanza, consultare il medico o il farmacista prima dell'utilizzo. Non utilizzare sotto i 12 anni.

Controindicazioni ed effetti collaterali: non utilizzare se presenti ipersensibilità o allergie verso uno o più componenti. Non utilizzare con altri dispositivi medici o farmaci senza aver precedentemente consultato il parere del medico o del farmacista.

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e fonti di calore.

Confezione: 6 microclismi da 9 g ciascuno. Il contenitore monodose consente l'idonea conservazione del prodotto.

Scadenza: vedere la scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Data ultima revisione: Gennaio 2025



Pharmalife Research s.r.l.
Via Casa Paradiso 2/A
23846 Garbagnate Monastero (LC)
Italia

LEGENDA



Fabbricante



Numero di lotto



Tenere al riparo dalla luce



Codice prodotto



Non riutilizzare



Scadenza



Conformità alle norme comunitarie europee



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso




Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato

Benexè® Micro-enemas Natural Adults is a CE Medical Device based on Altelax, a polysaccharide complex of Altea and Mallow with evacuating, emollient action and protective of the rectal mucosa. Softens faeces, facilitates evacuation and counteracts discomfort, irritation and inflammation present in case of constipation. Also contains Honey and extracts vegetables such as Lemon and Lavender. Also useful in cases where cleaning of the part is required terminal of the rectum and anus.

Composition: glycerol, demineralized water, Honey, Altelax (polysaccharide complex of Altea e Mallow), Hydroglyceric extract of Lemon, Hydroglyceric extract of Lavender, preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate.

How to use: from 12 years old use 1 micro-enema of 9 g as needed. In case of obstinate constipation use 2 doses at the same time. Each single-dose container is individually sealed until the moment of use to ensure hygiene. Open the microenema by removing the cannula cover (A).

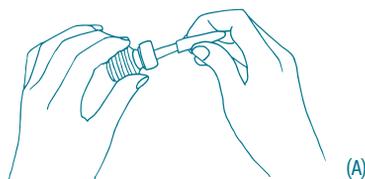

Lubricate the cannula with a few drops of product, introduce the cannula into the rectum and press the bellows fully (B).



At the end of the application, keep the bellows pressed until the cannula is completely extracted to prevent the product from being sucked back in. After using the product, avoid contact with the eyes and wash your hands thoroughly.

Warnings: for rectal use only. Do not swallow. In case of persistent stypsis, it is important to consult your doctor to exclude other diseases. Micro enemas should not be used in cases of acute abdominal pain or pain of unknown origin. Keep out of children's sight and reach. Do not use the product after the expiry date reported on the box. Do not use in case of damaged pack. In case of pregnancy or lactation or if a pregnancy is going to be planned, consult a doctor or pharmacist before use. Do not use the product under 12 years old.

Contraindications and side effects: do not use the product in case of hypersensitivity or allergies to one or more components. Do not use with other medical devices or medicines without first consulting a doctor or pharmacist.

Storage: keep in a cool and dry place, away from light and heat sources.

Packaging : 6 micro-enemas of 9 g each. The single-dose container allows the proper storage of the product.

Expiry date: See the expiry date reported on the box. The expiry date refers to product unopened and properly stored.

Date of last revision: January 2025



Pharmalife Research s.r.l.
Via Casa Paradiso 2/A
23846 Garbagnate Monastero (LC)
Italy

LEGEND



Manufacturer



Batch number



Keep away from light



Product code



Do not re-use



Expiry date



Compliance with European Union regulations



Attention: consult the instructions for use



Do not use in case of damaged pack